

Salida de Servicio - Conexión Rápida Tipo ENV 737-6 - Montada en Panel

Nosotros diseñamos y fabricamos nuestras unidades terminales para que duren y garanticen un flujo de gas médico constante y confiable para el paciente y el equipo médico.

Todas las salidas son 100% probadas contra fugas y para asegurar su integridad de flujo, y son limpiadas, antes del envío, en acordancia con los requerimientos de servicios de oxígeno.

Nuestras salidas están diseñadas por diseñadores industriales para garantizar un entorno atractivo y agradable para el paciente y el personal médico.



Características y Beneficios

- Acepta adaptadores de gas específicos ENV 737-6
- Todas las salidas son 100% probadas hidrostáticamente para detectar fugas. Las salidas se ensamblan, desengrasan y limpian en fábrica para el servicio de gases médicos.
- Indexado para eliminar la intercambiabilidad de los servicios de gas
- Tubería de entrada giratoria de 360° para facilitar la instalación
- Doble posición que permite aparcar el adaptador macho en la salida
- Bajo mantenimiento debido al uso de seladores VITON en el ensamblaje frontal (válvula de accionamiento)

Normas de Sistema de Gas Médico:

- Requisitos NFPA99 y EN ISO 7396-1

Normas Aplicables:

- ISO 9170-1, ENV 737-6

Sistema de Gestión de Calidad Silbermann:

- Marcado CE por el órgano certificador TÜV-SÜD.



Datos Técnicos


- La salida de gas médico debe ser de tipo SILBERMANN ENV, manufacturada en conformidad con ISO 9170-1 ENV 737-6
- La salida debe ser específica de gas, indexando cada panel de servicio frontal a un módulo de montaje específico de gas indexado
- La salida de presión positiva y negativa consistirá en válvulas de retención primaria y secundaria para permitir las pruebas y el mantenimiento en línea
- La salida se fabricará con un tubo de cobre OD tipo K de 175 mm de largo, 12,7 mm (1/2 ") de diámetro exterior. El tubo interno estará soldado con plata al cuerpo de salida
- Con el montaje interno empotrado, la profundidad de la salida debe ser ajustable para compensar varios espesores de pared
- La salida de conexión rápida debe cumplir con el tipo estándar ISO 9170-1 y aceptar solo el adaptador específico correspondiente de gas ENV 737-6
- Caída de presión de menos de 20 Kpa a través de la salida a 120 LPM y 350 Kpa (3,5 Bar) de presión de entrada
- La salida permite un flujo de hasta 600 LPM y una presión de 400 KPa (4 bar) cuando está completamente abierta

Salida de Servicio - Conexión Rápida Tipo ENV 737-6 - Montada en Panel

Tubería de Gas Médico



Dimensiones [mm]

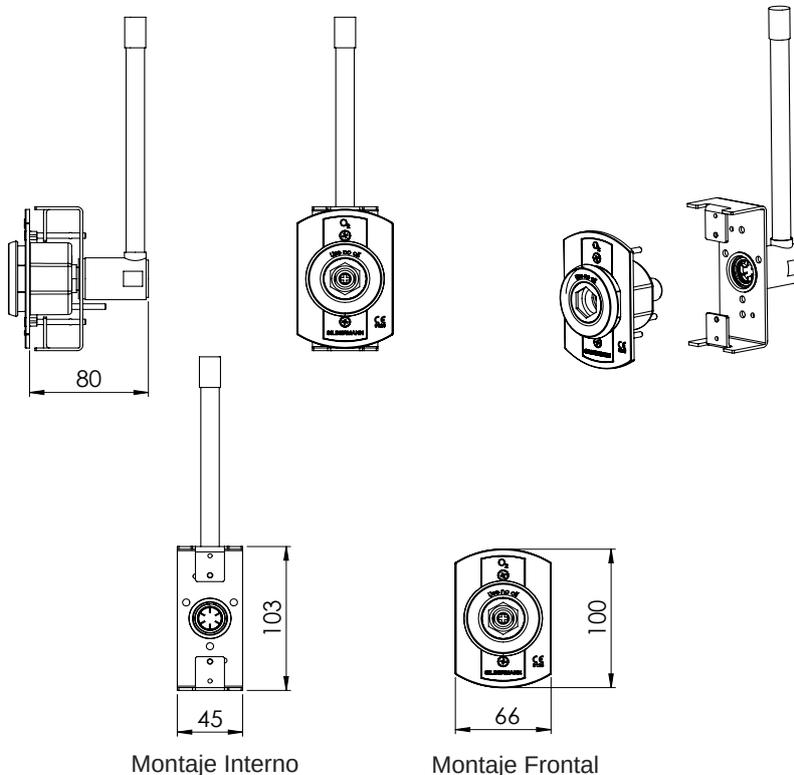

Números de Catálogo

Servicio de Gas	Código de Color	No. Catálogo
Oxígeno	Blanco	3776660
Aire Médico	Negro y Blanco	3776661
Vacío	Gris	3776662
Óxido Nitroso	Azul	3776663
CO ₂	Amarillo	3776664
Aire 800	Negro	3776665
Nitrógeno	Negro y Blanco	3776666

Distribuido por:

SILBERMANN Tecnologías Ltda.

Dirección: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com