

SILBERMANN XANADU- Nuevo Panel de Alarma

Pantalla Táctil para Gas Medicinal de Mayor Tamaño
en la Industria

Comunicación Cifrada y Segura

Diseño Moderno





El espacio de trabajo médico es un entorno estresante que requiere que el personal médico responda de manera rápida y eficiente asegurando un flujo de trabajo sin problemas en todo momento.

El nuevo panel de alarma de gases medicinales XANADU proporciona información clara, segura y confiable sobre los gases, crucial cuando se trata de equipos de soporte vital.

Alta Conectividad



El nuevo panel de alarma de gases medicinales XANADU permite enviar toda la información que se muestra a cualquier dispositivo o sistema a través de RS485, ethernet o WIFI de forma segura. Permite ver una imagen en tiempo real de la pantalla del Panel de alarma de los gases medicinales en cualquier dispositivo móvil.

Toda la información de gases medicinales puede ser enviada al sistema de monitoreo principal del centro de salud. En caso de alarma, un SMS o correo electrónico es enviado a la persona técnica designada.

La nueva tecnología permite que el nuevo Panel de alarma de gas medicinal XANADU reciba información de otros paneles de alarma remotos y sistemas múltiples y la muestre en la pantalla. Esto le permite replicar / duplicar un panel visualizado, total o parcialmente, en cualquier ubicación dentro o fuera de la instalación médica.

El nuevo panel de alarma de gas medicinal XANADU hace que la tarea de monitoreo y mantenimiento del sistema de gases médicos sea más eficiente y, como resultado, rentable.




Puesta en Marcha Simple



Para poder utilizar el sistema de gases medicinales, las normas médicas requieren que el sistema sea verificado.

Nuestra función de puesta en marcha le permite inspeccionar visualmente la presión de gas, mediante una marca especial de presión de gas, ubicada en la parte superior del medidor de presión / vacío, en cualquier momento. Este método simple pero eficiente elimina la carga registrando la presión de cada gas en cada área monitoreada.

Marca de presión

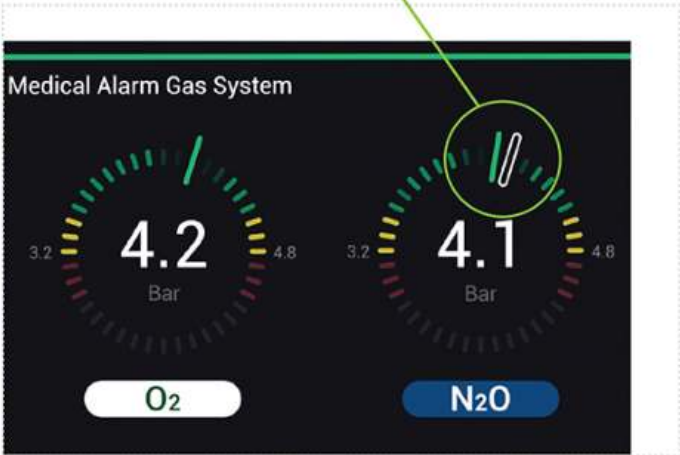

Mantenimiento Fácil




Como operación diaria, se requiere que el personal de mantenimiento verifique la operación correcta del panel de alarma de todo gas medicinal.

El nuevo panel de alarma de gas medicinal XANADU está diseñado para simplificar esta operación, presentando visualmente toda la información requerida para las operaciones de mantenimiento diario. El panel incluye puntos de ajuste de alarma y una barra de "respiración" que indica continuamente, el funcionamiento correcto de todos los sensores y software de una manera gráfica y sencilla.

Para monitorear y verificar fácilmente las alarmas o cualquier cambio de configuración en el Panel de Alarma de gases medicinales, disponemos de una pantalla de registro que muestra la hora y el lugar con una descripción de lo que está sucediendo.

Barra de 'Respiración'

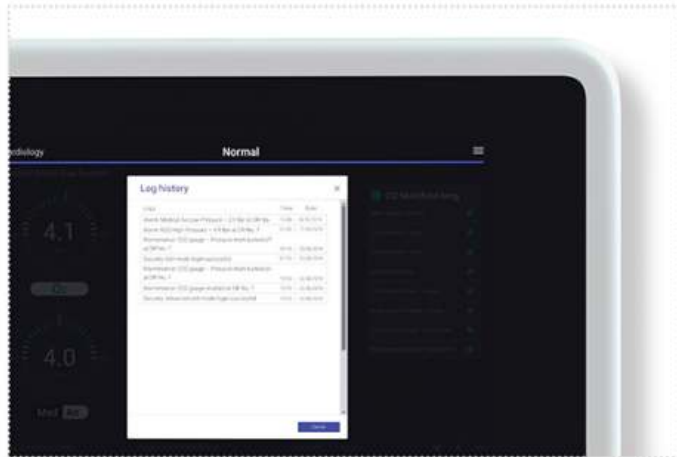

Diseño Innovador



El avanzado panel de alarma de gases medicinales XANADU incorpora un diseño innovador, mostrando información de los gases medicinales en forma digital y gráfica en una pantalla táctil LCD HD de 12".

El diseño moderno permite que el personal médico y técnico vea los datos de la pantalla de manera clara y sencilla a distancia, preservando así el flujo de trabajo uniforme requerido en momentos de emergencia, así como en tiempos de rutina.

El diseño del panel toma en cuenta los requisitos de desinfección del entorno médico, desde su diseño pasando por la geometría del panel y hasta los materiales de construcción.



Información Segura



Cuando se trata de equipos de soporte vital, es necesaria la mejor y más actualizada tecnología cibernética.

En Silbermann, una empresa con sede en Israel, somos muy conscientes de este asunto. El nuevo panel de alarma de gas medicinal XANADU tiene instalado un software con la mejor tecnología de seguridad.

Toda comunicación desde y hacia el nuevo Panel de alarma de gas medicinal de XANADU está encriptada para mantener la información protegida contra amenazas maliciosas.



En esencia, esto hace que el nuevo panel de alarma de gas medicinal XANADU sea una solución global.

Normas Internacionales

NFPA99, ISO7396, G0-1, HTM 02-01.

Sistema de Gestión de Calidad de Silbermann

ISO 9001-2015 & ISO 13485-2016

CE 0123



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605,
Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com

www.silbermann.com

Distributed by: